


DISPOSITIVO PARA

# FUSIÓN INTERSOMÁTICA CERVICAL

DEVICE FOR CERVICAL INTERSOMATIC FUSION



[www.southamericaimplants.com](http://www.southamericaimplants.com)

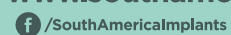

/SouthAmericaImplants



/SouthAmericaImplants

X-ZONE es un dispositivo autónomo diseñado para la fusión intersomática cervical. Combina la funcionalidad de un espaciador intersomático cervical y las ventajas de una placa cervical anterior bloqueada. El espaciador está fabricado en Peek, mientras que la zona de fijación es íntegramente de titanio, lo que asegura que el dispositivo se fije de manera firme y efectiva al cuerpo vertebral.

*X-ZONE is a stand-alone device for cervical intersomatic fusion. It combines the functionality of an intersomatic spacer with the benefits of an anterior cervical locking plate. The spacer is made of PEEK, while the fixation section is entirely made of titanium, which enables the device to secure firmly to the vertebral body.*

## BENEFICIOS

### BENEFITS

Combina la funcionalidad de un dispositivo inter-somático y las ventajas de una placa cervical; esto simplifica el procedimiento y reduce el tiempo quirúrgico y el abordaje.

*It combines the functionality of an intersomatic device with the benefits of a cervical plate. This simplifies the procedure, reduces the time for the surgical procedure and facilitates the approach.*

Diseño anatómico que logra recuperar la altura intervertebral requerida. Se presenta en diferentes alturas, de 5,0 a 12,0mm.

*Its anatomical design enables to recover the intervertebral height required. Available in various heights, from 5.0 to 12.0mm.*

Los tornillos X-ZONE tienen cabeza cónica de bloqueo en un sólo paso, lo que permite introducirlos y bloquearlos al dispositivo.

*X-ZONE screws have a one-step conical locking head, which enables to insert the screws and fix them to the device.*

Sistema Torx con dispositivo de limitador de torque, elimina la posibilidad de rotura del atornillador evitando complicaciones.

*Torx System with torque limiter eliminates any possibility of screwdriver breakage thus avoiding complications.*

El dispositivo se presenta pre-armado y estéril, listo para usar.

*The device is supplied preassembled and sterile, ready for use.*

## INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

### INDICATIONS & CONTRAINDICATIONS

Enfermedad degenerativa del disco.

*Degenerative disc condition.*

Estenosis espinal.

*Spinal stenosis.*

Falla en fusiones anteriores.

*Failure of prior fusions.*

Fractura espinal.

*Spinal fracture.*

Tumor espinal.




*Spinal tumor.*

Osteoporosis severa.

*Severe osteoporosis.*

Infección espinal.

*Spinal infection.*

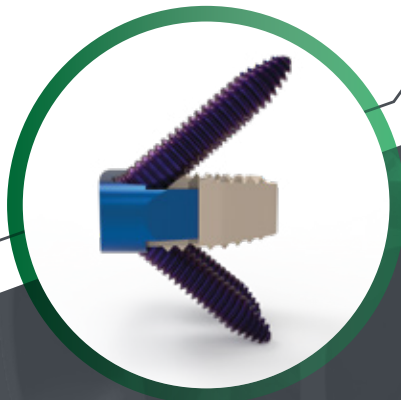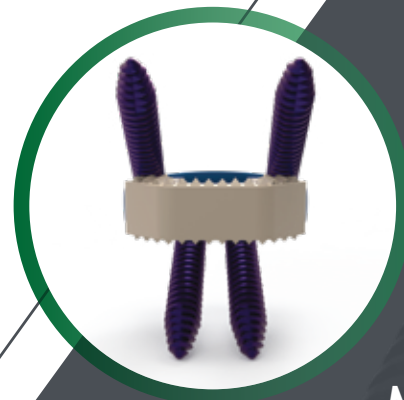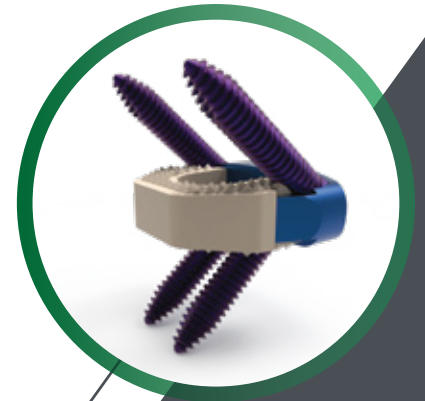

## MEDIDAS

### SIZES

Cage Cervical Bloqueado X-ZONE | PEEK

*X-ZONE Locking Cervical Cage | PEEK*

1867-000 - 1874-000 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm.

Tornillo Para Cage Cervical Bloqueado  
X-ZONE 3mm. | TITANIO

*X-ZONE Locking Cervical Cage Screw 3mm. | TITANIUM*

1875-000 - 1877-000 12 / 14 / 16 mm.

